

中圧分取用高性能ディスポーザブルカラム

2chパラレル分取精製システム

Purif[®]シリーズ

SI

ODS

NH

ポリマー

アカデミックキャンペーン

数量限定!!

・高性能カートリッジカラムが
30~40%OFF!

・分取精製装置が
お得なセットで特別価格!!


- ◆ 期間：2019年11月1日~2020年3月15日受付まで
- ◆ キャンペーン価格：紙面の価格表をご参照ください。
- ◆ 対象者：民間企業以外にご所属の研究者の方
- ◆ お申し込み方法：裏面申込書に必要事項をご記入の上、ご注文書と一緒に送ってください。
- ◆ 本キャンペーンは数量限定のため、在庫がなくなり次第終了いたします。



シリカとは異なる分離を試したい 天然物分取の一次分取にお困りの方に！

【分取例】高麗人参パウダーに含まれる微量有効成分の測定

(当社測定値)

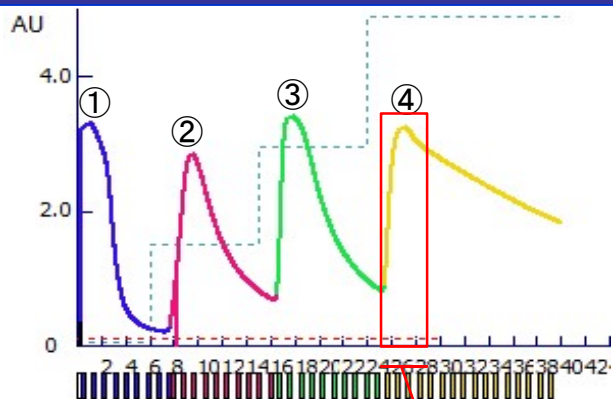


ジンセノシドRb1 含む画分

【分取条件】


装置: Purif®-Rp2(中圧、高感度セル) カラム: 修飾ポリスチレン系 (Antares SIZE60)
 移動相: A:水/B:メタノール
 (B.0-0% (0-6分), B.30-30% (6-15分), B.60-60% (15-24分), B.100-100% (24-40分))
 流量: 20mL/min 検出: UV203nm

分取フローチャート

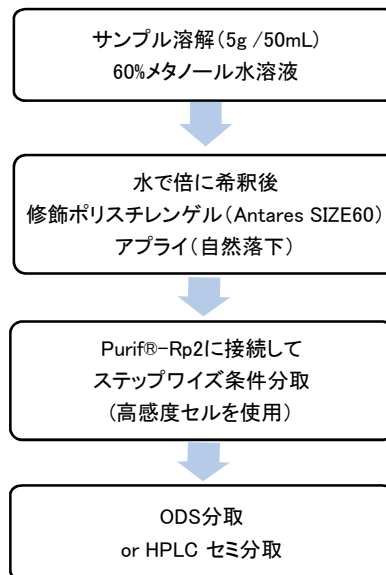

【分取例】ODSとの比較

(当社測定値)

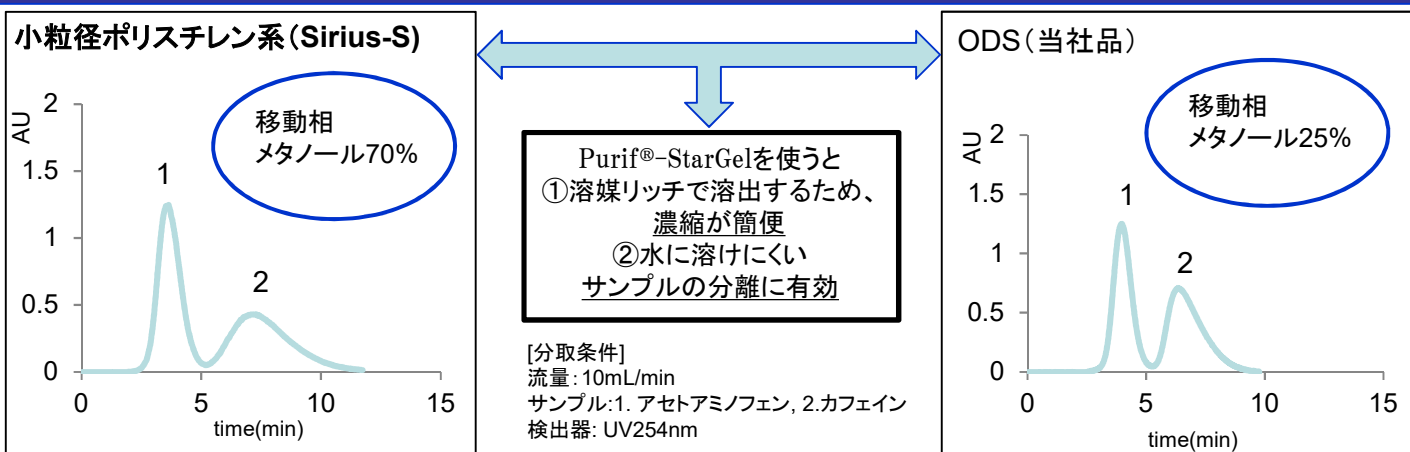

Purif®-StarGelシリーズ ■ キャンペーン対象製品 価格表 (税抜 (円))

製品名	基材 粒度分布	最頻度半径 (Å) 耐pH	カラムサイズ (ポリウム:mL)	ゲル量 (g)*1	入り数	製品コード	キャンペーン価格 30%OFF	希望小売価格
Vega	メタクリル系 (大粒径) 355µm未満 99%以上	230~240 pH2~12	20	12~14	6	CAP04055	6,860	9,800
			60	40~42	5	CAP04056	10,500	15,000
			120	89~91	4	CAP04057	12,600	18,000
			200	133~135	2	CAP04156	11,200	16,000
Sirius	ポリスチレン系 (大粒径) 250µm以上 90%以上	290 pH2~12	20	12~14	6	CAP04064	6,300	9,000
			60	40~42	5	CAP04065	9,800	14,000
			120	89~91	4	CAP04066	11,200	16,000
			200	133~135	2	CAP04159	9,800	14,000
Sirius-S	ポリスチレン系 (小粒径) 63~150µm 70%以上	290 pH2~12	20	12~14	6	CAP04067	15,400	22,000
			60	40~42	5	CAP04068	24,500	35,000
			120	89~91	4	CAP04069	33,600	48,000
			200	133~135	2	CAP04160	29,400	42,000
Antares	修飾ポリスチレン系 (大粒径) 250µm 以上 90%以上	110 PH2~12	20	15~17	6	CAP04073	6,860	9,800
			60	47~49	5	CAP04074	11,200	16,000
			120	90~93	4	CAP04075	14,000	20,000
			200	150~155	2	CAP04162	11,200	16,000
Antares-S	修飾ポリスチレン系 (小粒径) 63~150µm 70%以上	110 PH2~12	20	15~17	6	CAP04076	34,300	49,000
			60	47~49	5	CAP04077	68,600	98,000
			120	90~93	4	CAP04078	112,000	160,000
			200	150~155	2	CAP04163	91,000	130,000



*1,表示の値は目安です。含水率により変わります。充填溶媒は含水アルコールです。

※製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合がございます。

高分離能 + 時短(高速コンディショニング)を実現!

【分取例】フタル酸エステルの測定

(当社測定値)

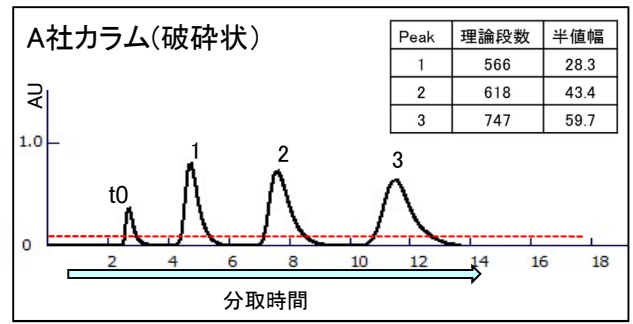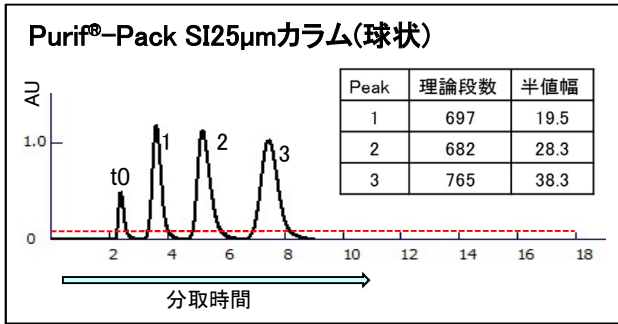

Purif-Pack®

- ・分取時間5分削減
- ・溶媒を100mL削減
- ・コンディショニング時間が半減!
(2倍流速が可能)

【分取条件】

分取精製装置: Purif-aios

移動相: ヘキサン/酢酸エチル (85/15),

流量: 20mL/min

サンプル: 1.フタル酸ジブチル 300mg/mL 2.フタル酸ジエチル 300mg/mL

3.フタル酸ジメチル 300mg/mL

注入量: 300µL 検出: UV254nm

40%
OFF!

Purif-Pack® EXシリーズを

5箱ご購入ごとにもう1箱プレゼント! ※

さらに!



組み合わせ自由♪

*プレゼント品はご購入いただいた製品の中からお選びください

Purif-Pack-EX ■キャンペーン対象製品 価格表 (税抜(円))

ゲル種	製品コード	品名	本数/箱	キャンペーン価格 40%OFF	希望小売価格
SI 50 um	CAP04132	SI-50 SIZE:20	30	18,000	30,000
	CAP04133	SI-50 SIZE:60	20	15,000	25,000
	CAP04134	SI-50 SIZE:120	20	27,600	46,000
	CAP04135	SI-50 SIZE:200	12	25,920	43,200
	CAP04136	SI-50 SIZE:400	12	43,200	72,000
	CAP04137	SI-50 SIZE:800	5	45,000	75,000
SI 25 um	CAP04138	SI-25 SIZE:20	30	25,800	43,000
	CAP04139	SI-25 SIZE:60	20	19,200	32,000
	CAP04140	SI-25 SIZE:120	20	37,800	63,000
	CAP04141	SI-25 SIZE:200	12	36,000	60,000
	CAP04142	SI-25 SIZE:400	5	30,000	50,000
charge	CAP04214	Charge SI SIZE:20	30	16,200	27,000
	CAP04215	Charge SI SIZE:60	20	18,000	30,000
接続パーツ	CAP00271	シールアダプタ SIZE20 (組上)		19,200	32,000
	CAP00272	シールアダプタ SIZE60 (組上)		21,600	36,000
	CAP00273	シールアダプタ SIZE200 (組上)		25,800	43,000
	CAP01370	シールアダプタ SIZE800 (組上)		41,400	69,000
NH 50 um	CAP04143	NH-50 SIZE:20	30	57,000	95,000
	CAP04144	NH-50 SIZE:60	20	50,700	84,500
	CAP04145	NH-50 SIZE:120	20	66,000	110,000
	CAP04146	NH-50 SIZE:200	12	49,320	82,200
	CAP04147	NH-50 SIZE:400	5	37,980	63,300
	NH 25 um	CAP04148	NH-25 SIZE:20	10	28,800
CAP04149		NH-25 SIZE:60	10	59,700	99,500
ODS 50 um	CAP04150	ODS-50 SIZE:20	10	22,800	38,000
	CAP04151	ODS-50 SIZE:60	10	46,800	78,000
	CAP04152	ODS-50 SIZE:200	5	58,800	98,000
ODS 25 um	CAP04153	ODS-25 SIZE:20	5	36,000	60,000
	CAP04154	ODS-25 SIZE:60	5	58,800	98,000
接続パーツ	CAP01290	カラムホルダ SIZE20 (脱落防止付)		3,000	5,000
	CAP01291	カラムホルダ SIZE60/120兼用 (脱落防止付)		3,300	5,500
	CAP01292	カラムホルダ SIZE200/400兼用 (脱落防止付)		3,600	6,000
	CAP02033	カラムホルダ SIZE800		10,800	18,000

※Purif-Pack-EXのご使用には、専用のシールアダプタとカラムホルダが必要です。新規ユーザー様に限り、専用のシールアダプタとカラムホルダを無償提供させていただきます。詳しくは下記までお問合せください。

※製品の仕様、価格などは予告なく変更される場合がございます。


2chパラレル分取精製システム Purif[®]-aios

UV吸収のないサンプルを分取したい方へ

【分取例】 UV吸収 有/無の混合サンプル測定

(当社測定値)

サンプルロスがない!

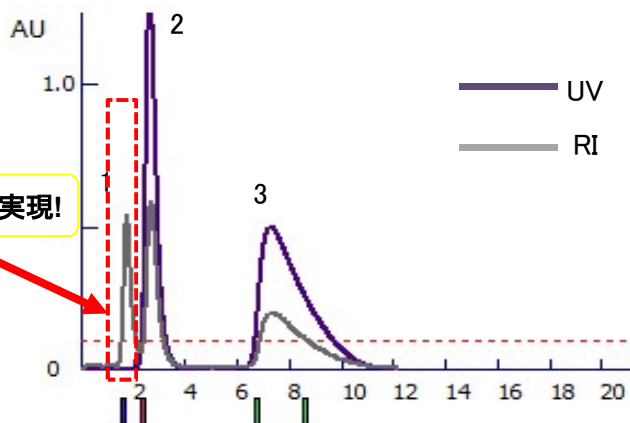

【分取条件】

装置: Purif[®]-aios 検出器: Shodex[®]-RI 502

カラム: Purif-Pack[®] ODS50-SIZE20

移動相: 水/メタノール (80/20) 流量: 10mL/min

サンプル: 1. グルコース 7mg/mL, 2. ニコチンアミド 7mg/mL 3. カフェイン 7mg/mL

注入量: 2mL 検出: UV254nm, RI-502(40°C)

限定3セット 40%OFF

Purif[®]-aios (自動溶媒切替なし) + Shodex[®] RI-502

希望小売価格 ¥5,200,000 (税別)

限定3セット 44%OFF

Purif[®]-aios (自動溶媒切替付き) + 高性能カートリッジカラム Purif-Pack[®] または 接続パーツ 20万円分

希望小売価格 ¥5,000,000 (税別)

Purif[®]-aios+RI検出器セット
特別価格 ¥3,120,000 (税別) * 据え付け調整込み

Purif[®]-aios+20万円分セット
特別価格 ¥2,800,000 (税別) * 据え付け調整込み

【キャンペーンお申込・お問合せ先】

昭光サイエンス株式会社 E-mail: yokohama@shoko-sc.co.jp

東日本営業部 TEL: 03-3459-5104 FAX: 03-3459-5081 西日本営業部 TEL: 06-6450-0329 FAX: 06-6450-0297
名古屋営業所 TEL: 052-589-3570 FAX: 06-6450-0297 福岡営業所 TEL: 092-753-9957 FAX: 06-6450-0297

Purif[®]シリーズ アカデミックキャンペーン2019申込書

お申込み日		ご芳名	
研究機関 学校名		学科 研究室名	
ご住所	〒		
Tel		E-mail	
ご注文製品名 ※5箱ご購入ごとに 1箱プレゼント! (プレゼントご希望製品を ○で囲ってください)	①	製品コード	①
	②		②
	③		③
	④		④
	⑤		⑤
代理店名		代理店 担当者名	

昭光サイエンス(株)はご記入いただきます個人情報をお問い合わせへの対応、製品・サービス等の情報提供および営業活動以外の目的では使用いたしません。個人情報保護の方針につきましては、www.shoko-sc.co.jp/privacy/index.html をご覧ください。