

パッケージワーキングスタンダード

元素分析計—安定同位体比質量分析計システム (EA/IRMS) を使用して炭素-窒素安定同位体比を測定する時に使用する、装置コンディションチェックを行うためのワーキングスタンダードです。


- 初めて EA/IRMS で安定同位体比を測定する方へ。
- ほしいデータに直接関与しない作業の時間と労力をデータ解析に使用しませんか？
- 取りたいデータが多くないのなら、大量のワーキングスタンダードは必要ありません。

安定同位体比受託分析で長年の実績がある当社スタッフが、当社で販売しているワーキングスタンダードを予めスズに梱包してお届けします。手間のかかる秤量・スズの形成を省き、皆様の研究時間の節約に少しでも貢献させてください。

96穴マイクロプレート入り の一例です。
サンプリング量・スズの種類・作製する数など、
ご使用装置の感度を考慮の上、お客様のニーズ
に合わせて調製いたします。
梱包するワーキングスタンダードは当社で厳密に
値付けしたワーキングスタンダードです。

取扱ワーキングスタンダードの種類例

L-Alanine
Glycine
Histidine

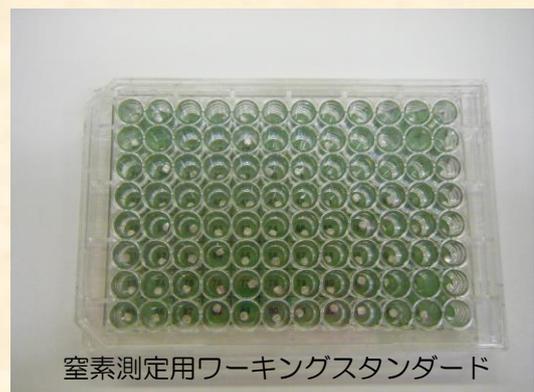

窒素測定用ワーキングスタンダード

詳細は下記までお問い合わせください。

昭光サイエンス株式会社 カスタマーサポート部 埼玉事業所

住所 〒345-0023 埼玉県北葛飾郡杉戸町本郷 473-3

電話 0480-35-2915 FAX 0480-35-2930